


Ensamblaje del GlideScope® Cobalt


Diseñado para el éxito en un solo intento

1 Introduzca el cable del vástago guía para vídeo en el puerto situado en el frontal del monitor.

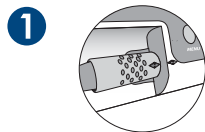


2 Introduzca el vástago guía para vídeo en el GVL® Stat hasta escuchar un clic cuando el vástago guía alcance su posición.

Asegúrese de introducir correctamente haciendo coincidir el "anillo" ancho del vástago guía con el "anillo" ancho del GVL® Stat; o haciendo coincidir el logotipo de GlideScope®, situado en el lateral del vástago guía para vídeo, con el logotipo de GlideScope®, situado en el lateral del GVL® Stat.

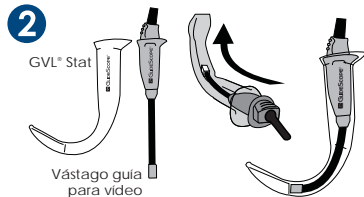

3 Para separar el GVL® Stat del vástago guía para vídeo, sujete la guía por la base y tire con firmeza. Oirá un clic cuando la guía se separe, y oirá el chasquido producido por un pequeño componente de plástico situado en el interior del GVL® Stat. Esto es normal y no afecta al funcionamiento del vástago guía para vídeo.

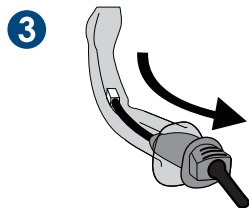


Limpieza del GlideScope® Cobalt

Diseñado para el éxito en un solo intento

NO LO SOMETA A AUTOCLAVE ni lo exponga a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F).
El vástago guía para video del GlideScope® Cobalt puede limpiarse con una solución de isopropanol al 70% después de su uso. Cuando sea necesario, puede incluirse en un proceso de limpieza integral como se indica a continuación:

- 1** Despegue el GVL® Stat del vástago guía para vídeo.
Nota: el GVL® Stat usado se considera un riesgo biológico y debería ser desechado de acuerdo con las normativas locales aplicables en la jurisdicción del usuario.
- 2** Desconecte el vástago guía para vídeo del monitor.
- 3** Coloque la tapa protectora para limpieza sobre el conector como se muestra.
- 4** Lave el vástago guía para vídeo del GlideScope® manualmente con un detergente como el Manu-Klenz o con un agente para desbridamiento enzimático como el Medzyme para eliminar cualquier resto de material extraño de la superficie del dispositivo.
- 5** Use uno de los siguientes métodos de desinfección: Cidex®, Steris System 1®, Sterrad®, or MetriCide® de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

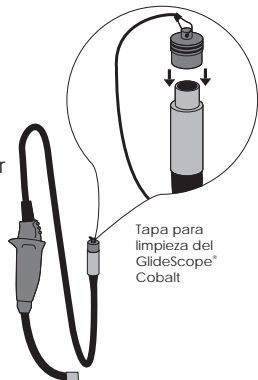

Tapa para
limpieza del
GlideScope®
Cobalt

Oficinas centrales de la compañía:
Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, EE. UU.
Tel: 800.331.2313 (solo EE. UU. y Canadá)
Tel: 425.867.1348 Fax: 425.883.2896

Fabricante:
Verathon Medical (Canadá) ULC
4224 Manor Street
Burnaby, Columbia Británica
Canadá, V5G 1B2

Representante para la CE:
Verathon Medical (Europa) B.V.
Linnaeusweg 11
3401 MS IJsselstein Países Bajos
Tel: +31.30.68.70.570
Fax: +31.30.68.70.512

 **VERATHON**
MEDICAL

www.verathon.com