

GlideRite estilete rígido

Manual de funcionamiento y mantenimiento

GlideRite
verathon

GlideRite estilete rígido

Manual de funcionamiento y mantenimiento

En vigor desde: viernes, 7 de octubre de 2022

Precaución: Las leyes federales de Estados Unidos limitan la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción de estos.

Información de contacto

Para obtener información adicional acerca del sistema GlideScope o el estilete rígido GlideRite, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon o visite verathon.com/service-and-support.

Verathon Inc.

20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011 EE. UU.
Tel: +1 800 331 2313 (EE. UU./Canadá)
Tel.: +1 425 867 1348
Fax: +1 425 883 2896
verathon.com



Verathon Medical (Canadá) ULC

2227 Douglas Road
Burnaby, BC V5C 5A9
Canadá
Tel.: +1 604 439 3009
Fax: +1 604 439 3039



Verathon Medical (Europa) B.V.

Willem Fenengastraat 13
1096 BL Ámsterdam
Países Bajos
Tel.: +31 (0) 20 210 30 91
Fax : +31 (0) 20 210 30 92

Verathon Medical (Australia) Pty Limited

Unit 9, 39 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Australia

En Australia: 1800 613 603 Tel. / 1800 657 970 Fax
Internacional: +61 2 9431 2000 Tel. /
+61 2 9475 1201 Fax



MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Suiza



MDSS-UK RP Ltd.

6 Wilmslow Road, Rusholme
Manchester M14 5TP
Reino Unido
Tel.: +44 (0)7898 375115



CH

Anandic Medical Systems AG

Stadtweg 24
8245 Feuerthalen
Suiza



Copyright© de 2022 de Verathon Inc. Todos los derechos reservados.

GlideScope, el símbolo de GlideScope, GlideRite, Verathon y el símbolo de la antorcha de Verathon son marcas comerciales de Verathon Inc. El resto de las marcas y de los nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

No todos los productos de Verathon Inc. mostrados o descritos en este manual están disponibles para la venta comercial en todos los países.

La información de este manual puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Para obtener la información más actualizada, consulte los documentos disponibles en verathon.com/service-and-support.

Índice

INFORMACIÓN IMPORTANTE	1
Descripción del producto.....	1
Declaración de uso previsto.....	1
Declaración de prescripción.....	1
Aviso a todos los usuarios	1
Advertencias y precauciones	2
INTRODUCCIÓN	4
USO DEL ESTILETE	5
<i>Procedimiento 1. Uso del estilete rígido GlideRite</i>	<i>5</i>
REPROCESAMIENTO	6
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	7
Especificaciones.....	7
Dimensiones.....	8
GLOSARIO	9

Información importante

Descripción del producto

El estilete rígido GlideRite se ha diseñado para ayudar a colocar el tubo endotraqueal (también conocido como *TET* o *TE*). La rigidez de este estilete reutilizable ayuda al usuario a manipular el tubo a voluntad para realizar la intubación. El estilete se usa en tubos endotraqueales de 6,0 mm y más largos.

Declaración de uso previsto

Como ayuda en la intubación con un tubo endotraqueal.

Declaración de prescripción

Precaución: Las leyes federales de Estados Unidos limitan la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción de estos.

Aviso a todos los usuarios

Verathon recomienda que todos los usuarios lean este manual antes de usar el estilete rígido GlideRite. No hacerlo puede provocar lesiones al paciente, reducir el rendimiento del estilete e, incluso, anular su garantía. Verathon recomienda a todos los nuevos usuarios:

- Obtener formación por parte de un profesional cualificado
- Practicar usando el estilete en un maniquí antes de usarlo clínicamente
- Adquirir experiencia de formación clínica con pacientes sin anomalías en las vías respiratorias

Advertencias y precauciones

Las *advertencias* indican que el uso o el uso indebido del dispositivo pueden provocar lesiones, la muerte o reacciones adversas graves. Las *precauciones* indican que el uso o el uso indebido del dispositivo pueden provocar un problema como, por ejemplo, que el producto funcione incorrectamente o se dañe. Preste atención a las secciones del manual marcadas como *Importante*, ya que contienen recordatorios o resúmenes de las precauciones siguientes que conciernen a un componente o una situación de uso específicos. Tenga en cuenta las siguientes advertencias y precauciones.

Advertencias



ADVERTENCIA

No permita que el estilete pase más allá de las cuerdas vocales; el tubo de ventilación debe pasar al estilete e introducirse en la vía respiratoria. El estilete no debe pasar hacia la glotis bajo ninguna circunstancia.



ADVERTENCIA

Durante su uso, el estilete no debe salir del extremo del tubo endotraqueal.



ADVERTENCIA

No utilice el producto si parece estar dañado. Revise el producto antes de cada uso.



ADVERTENCIA

Este producto no se envía en condiciones estériles. Realice la limpieza y aplique la desinfección de alto nivel o la esterilización antes de utilizarlo por primera vez. De no hacerlo, se aumenta el riesgo de infección.



ADVERTENCIA

El estilete se considera un dispositivo semicrítico que podría entrar en contacto con las vías respiratorias. Después de cada uso, debe limpiarse a fondo y pasar por desinfección de alto nivel o esterilización.



ADVERTENCIA

Dado que el producto podría estar contaminado con sangre humana o fluidos corporales que pueden transmitir patógenos, todos los centros de limpieza deben cumplir la norma 29 CFR 1910.1030 de OSHA (EE. UU.) relativa a la exposición a patógenos transmitidos por la sangre, o una norma equivalente.



ADVERTENCIA

Este producto solamente se puede limpiar, desinfectar o esterilizar utilizando los procesos aprobados proporcionados en el Manual de reprocesamiento de productos GlideScope y GlideRite (número de referencia 0900-5032). Los métodos de limpieza, desinfección y esterilización enumerados son los recomendados por Verathon de acuerdo con su eficacia o compatibilidad con los materiales de los componentes.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de residuos citotóxicos cuando limpie con Metrex CaviCide, enjuague exhaustivamente el componente como se indica en el Manual de reprocesamiento de productos GlideScope y GlideRite (número de referencia 0900-5032).



ADVERTENCIA

Verathon no ha realizado ningún análisis para establecer la compatibilidad de este producto con entornos donde se instala equipo de resonancia magnética (RM). Debido a esto, el propietario de este producto debe excluirlo de cualquier entorno de resonancia magnética (MR).

Precauciones



PRECAUCIÓN

Unión Europea únicamente: Si se produce un incidente grave durante el uso de este producto, debe notificarlo de inmediato a Verathon (o a su representante autorizado), a la autoridad competente del Estado miembro en el que se ha producido el incidente, o a ambos.

Introducción

El estilete rígido GlideRite se ha diseñado específicamente para usarlo con los videolaringoscopios GlideScope. El ángulo del estilete rígido GlideRite complementa el ángulo exclusivo del instrumento GlideScope, con el objeto de agilizar la colocación de un tubo endotraqueal y ayudar a reducir posibles traumatismos en el paciente.

Figura 1. Estilete rígido GlideRite y videolaringoscopio reutilizable GlideScope Titanium



CARACTERÍSTICAS


- Aporta maniobrabilidad para la colocación de un tubo endotraqueal
- Fabricado con acero inoxidable resistente y duradero
- Sencilla desinfección de alto nivel o esterilización en autoclave
- Diseñado para uso con tubos endotraqueales de 6,0 mm y más largos
- Práctico y económico
- Fácil de utilizar y de rápido aprendizaje

Uso del estilete

Procedimiento 1. Uso del estilete rígido GlideRite

No doble el estilete ni intente cambiarlo de forma. La forma del estilete está diseñada para complementar la curva del videolaringoscopio GlideScope.

1. Asegúrese de que el estilete haya sido sometido a desinfección de alto nivel o esterilización. Para obtener más información, consulte el *Manual de reprocesamiento de productos GlideScope y GlideRite*, disponible en verathon.com/service-and-support.
2. Compruebe que no se hayan producido daños en el estilete. Si el estilete está dañado, deséchelo y comuníquese con el servicio de atención al cliente de Verathon o con el representante local para pedir un estilete nuevo.
3. Coloque el tubo endotraqueal en el estilete. Asegúrese de que el extremo distal del estilete no se extienda más allá del extremo distal del TE.
4. Inserte el TE detrás o justo al lado del videolaringoscopio GlideScope.
5. Coloque el TE en la apertura de las cuerdas vocales. El estilete no debe pasar a través de ellas.
6. Cuando el TE haya alcanzado la abertura glótica, extraiga el estilete 5 cm (2 in) empujando hacia arriba la pestaña del pulgar del estilete. Esta extracción parcial del estilete del TE suaviza el extremo, con lo que permite que el tubo pase por las cuerdas vocales.

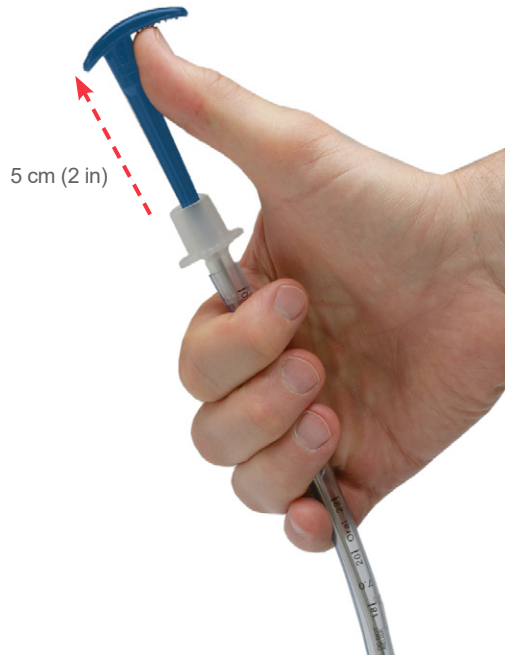

7. Coloque el TE conforme a la práctica estándar.
8. Extraiga el estilete del TE.
9. Para evitar que los contaminantes se sequen en la superficie del estilete, aplique un prelimpiador. Los contaminantes corporales tienden a fijarse firmemente a las superficies sólidas cuando se secan, lo que hace difícil eliminarlos.

Reprocesamiento

El estilete rígido GlideRite es un dispositivo reutilizable que necesita limpieza y desinfección de alto nivel o esterilización antes de usarse por primera vez y cada vez que se usa. Para obtener información sobre los requisitos de limpieza, desinfección y esterilización para este componente, consulte el *Manual de reprocesamiento de productos GlideScope y GlideRite*, que se encuentra disponible en verathon.com/service-and-support.

Especificaciones del producto

Especificaciones


Tabla 1. Especificaciones del estilete rígido GlideRite

ESPECIFICACIONES GENERALES		
Duración esperada del producto:		100 ciclos
Condiciones de operación:	Temperatura:	10 a 40 °C (50 a 104 °F)
	Humedad relativa:	10–95 %
	Presión atmosférica:	700-1060 hPa
Condiciones de envío y almacenamiento:	Temperatura:	De -20 a 45 °C (de -4 a 113 °F)
	Humedad relativa:	10–95 %
	Presión atmosférica:	440-1060 hPa

Dimensiones

Tabla 2. Dimensiones del estilete rígido GlideRite

ESTILETE RÍGIDO GLIDERITE (0803-0009)	
Especificación	Valor
Ancho del mango (A)	16 mm (0,6 in)
Longitud del mango (B)	84 mm (3,3 in)
Longitud de la varilla del estilete (C)	266 mm (10,5 in)
Diámetro de la extremidad distal (D)	5 mm (0,2 in)

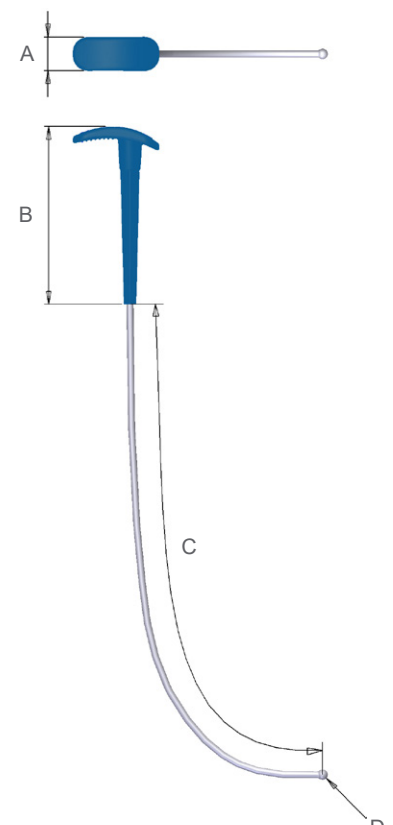

El diagrama muestra un estilete rígido con un mango azul y una varilla plateada. Las dimensiones están etiquetadas como A (ancho del mango), B (longitud del mango), C (longitud de la varilla del estilete) y D (diámetro de la extremidad distal). La varilla del estilete está curvada en la parte inferior.

Glosario

En la tabla siguiente se proporcionan definiciones para los términos especializados usados en este manual o en el propio producto. Para obtener una lista completa de advertencias, precauciones y símbolos de información usados en este u otros productos Verathon, consulte el *glosario de símbolos de Verathon* en verathon.com/service-and-support/symbols.

TÉRMINO	DEFINICIÓN
AER	Reprocesador endoscópico automatizado
Agua pura	Agua apta para la desinfección de alto nivel en cumplimiento de las normas locales y del centro médico
C	Celsius
CFR	Código de normativas federales (EE. UU.)
cm	Centímetro
CSA	Asociación Canadiense de Normalización
F	Fahrenheit
hPa	Hectopascal
in	Pulgada
l	Litro
ml	Mililitro
mm	Milímetro
OSHA	Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (agencia federal de los Estados Unidos)
TET	Tubo endotraqueal

verathon